




FINDEN SIE IHRE  
**PERFEKTE GRÖSSE**

Anleitung zum Messen und  
Auswählen der richtigen Größe  
Ihrer Neoflex-Haltungslösung.

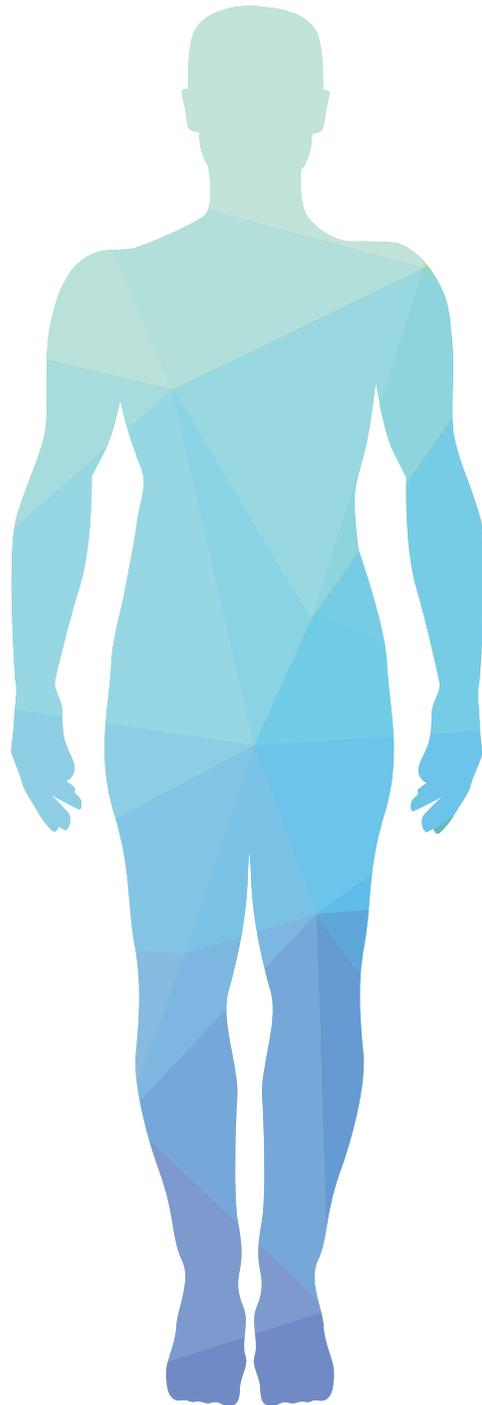

## Neo 00 Universal Gurte

- Neo 00.01 Multifunktionsband
- Neo 00.02 Verlängerung für Multifunktionsband

## Neo 20


- Neo 20.01 Brustweste – breit
- Neo 20.02 Brustweste mit Reissverschluss – breit
- Neo 20.03 Brustweste – schmal
- Neo 20.04 Brustweste mit Reissverschluss – schmal
- Neo 20.05 Schultergurt – vorne offen
- Neo 20.06 Schultergurt – vorne geschlossen
- Neo 20.07 Brustgurt

## Neo 30

- Neo 30.01 2-Punkt Hüftgurt
- Neo 30.02 4-Punkt Hüftgurt
- Neo 30.03 Abduktionsgurt

## Neo 40

- Neo 40.01 Wadenband
- Neo 40.02 Knöchelstabilisierung

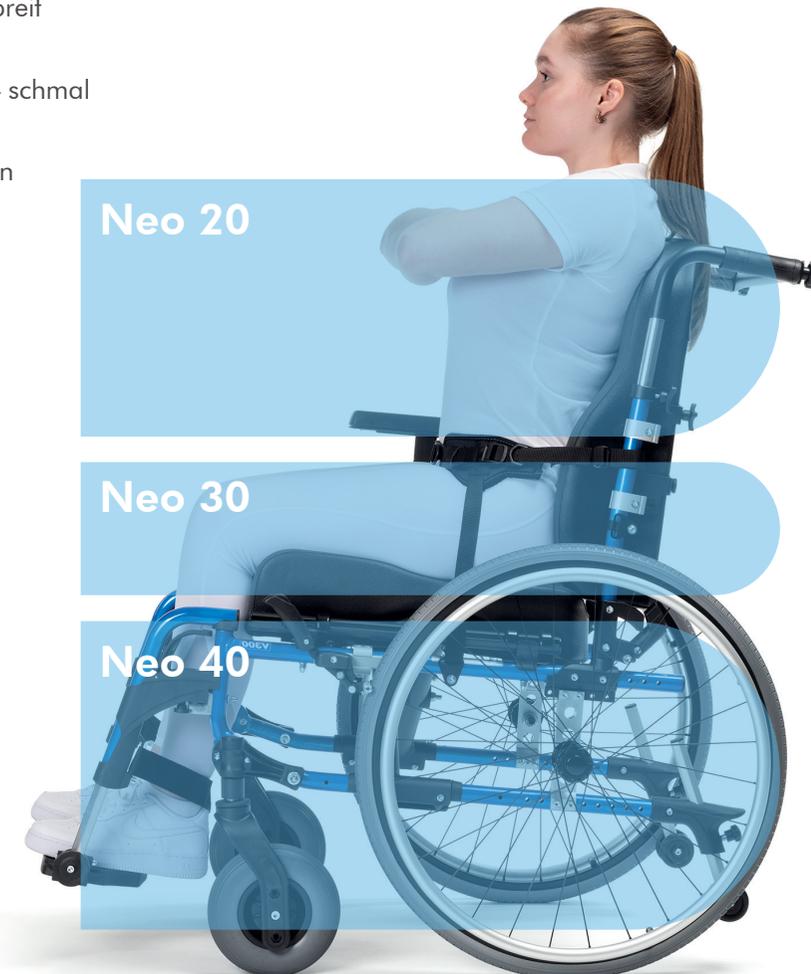


# WIE MESSEN?

Neo 00.01 Multifunktionsband

Neo 00.02 Verlängerung für Multifunktionsband

Messen Sie den gesamten **Brust- und Rückenumfang**, addieren Sie 15-20 cm hinzu und tragen Sie dieses Maß in die nachstehende Tabelle ein, um die richtige Größe zu ermitteln.

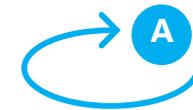

A	Größe
<80 cm	S
80-120 cm	M
121-140 cm	L
141-160 cm	XL

# WIE MESSEN?

**Neo 20.01** Brustweste – breit

**Neo 20.02** Brustweste mit Reissverschluss – breit

**Neo 20.03** Brustweste – schmal

**Neo 20.04** Brustweste mit Reissverschluss – schmal

Messen Sie die **Brustbreite unter den Armen** und tragen Sie dieses Maß in die nachstehende Tabelle ein, um die richtige Größe zu ermitteln.



B	Größe
>24 cm	XS
25-26 cm	S
27-32 cm	M
33-39 cm	L
40-46 cm	XL

# WIE MESSEN?

**Neo 20.05** Schultergurt – vorne offen

**Neo 20.06** Schultergurt – vorne geschlossen



Messen Sie die **Gesamtlänge von der Oberkante der Schulter bis zum Ellenbogenansatz** und tragen Sie dieses Maß in die nachstehende Tabelle ein, um die richtige Größe zu ermitteln.



A	Grösse
25-30 cm	S
31-37 cm	M
38-40 cm	L
41-45 cm	XL

# WIE MESSEN?

**Neo 30.01** 2-Punkt Hüftgurt

**Neo 30.02** 4-Punkt Hüftgurt


**Messen Sie die Beckenbreite** und tragen Sie dieses Maß in die nachstehende Tabelle ein, um die richtige Größe zu ermitteln.



A	Grösse
25-33 cm	XS
31-40 cm	S
39-52 cm	M
48-65 cm	L

# WIE MESSEN?

## Neo 30.03 Abduktionsgurt

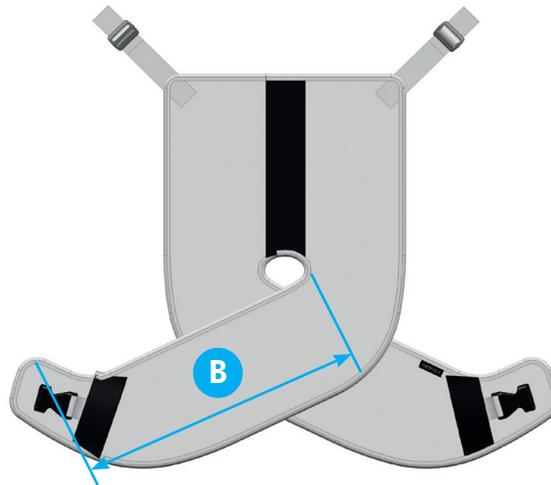

Messen Sie den Abstand von der Sitzfläche bis zur Außenseite des Oberschenkels, wie in der Abbildung gezeigt, und tragen Sie dieses Maß in die nachstehende Tabelle ein, um die richtige Größe zu ermitteln.

B	Größe
17-24 cm	XS
24-26 cm	S
27-32 cm	M
33-38 cm	L

# WIE MESSEN?

## Neo 40.01 Wadenband

Messen Sie den Abstand zwischen den Hauptrohren der Fußstütze und tragen Sie dieses Maß in die nachstehende Tabelle ein, um die richtige Größe zu ermitteln.



A	Größe
18-24 cm	S
25-32 cm	M
33-40 cm	L
40-50 cm	XL

# WIE MESSEN?

## Neo 40.02 Knöchelstabilisierung

Messen Sie den Umfang des **Knöchels** und tragen Sie dieses Maß in die nachstehende Tabelle ein, um die richtige Größe zu ermitteln.



	Grösse
14-17	XS
17-20	S
19-23	M
22-29	L
28-33	XL

