

Installation manual

MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLATIEHANDLEIDING
INSTALLATIONSANLEITUNG
MANUALE DI INSTALLAZIONE
MANUAL DE INSTALACIÓN
INSTRUKCJA INSTALACJI
PŘÍRUČKU PRO INSTALACI

Verso



Table des matières

Préface	2
1 Portée de la livraison	3
2 Outils	3
3 Réglages	4
3.1 Profondeur du siège.....	5
3.2 Longueur de cale-pied	6
3.2.1 Réglage par paliers.....	6
3.3 Profondeur d'accoudoir.....	6
3.4 Hauteur d'accoudoir	7

Préface

Ce manuel d'installation vous est fourni pour vous aider à installer et à réparer ce fauteuil roulant, ce manuel est offert. Veuillez le lire attentivement. Si vous avez encore des questions après la lecture de ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec Vermeiren.

Les informations fournies dans ce manuel s'appliquent au(x) fauteuil(s) roulant(s) :

- Verso

Des images du produit sont utilisées pour clarifier les instructions. Les détails du produit illustré peuvent diverger de votre produit.

Sur notre site Internet <http://www.vermeiren.com/>, vous trouverez toujours la version la plus récente des informations suivantes. Veuillez consulter régulièrement ce site Internet pour d'éventuelles mises à jour.

Les personnes malvoyantes peuvent télécharger la version électronique de ce manuel et la lire au moyen d'une application de texte-parole.



Manuel d'utilisation
Pour l'utilisateur et le revendeur spécialisé



Instructions d'installation (instructions relatives aux réglages des détails)
Pour le revendeur spécialisé



Tableau de couples (couples maximums des boulons et des écrous)
Pour le revendeur spécialisé



Manuel d'entretien des fauteuils roulants
Pour le revendeur spécialisé



Dessins des pièces (de rechange)
Pour le revendeur spécialisé

1 Portée de la livraison

Les éléments suivants sont compris dans la livraison.

- Cadre d'assise
- Unité de transmission, y compris console de commande et batterie
- Accoudoirs
- Repose-pieds
- Chargeur de batterie
- Outils
- Manuel
- Options

Veillez noter que la configuration de base peut différer dans les différents pays européens. Prenez contact avec votre revendeur spécialisé.

2 Outils

Pour réparer et régler le fauteuil roulant, les outils suivants sont nécessaires :

- Jeu de clés n^{os} 10
- Jeu de clés Allen n^{os} 3 à 5

3 Réglages

 ATTENTION

Risque de blessures ou de dommages

- Lisez le manuel d'utilisation du fauteuil roulant spécifique.
- Tenez compte des détails techniques et des limites d'utilisation prévues; cf. le manuel d'utilisation.
- Le fauteuil roulant doit être réglé par un revendeur spécialisé selon les instructions du présent manuel.
- Toute modification au produit annulera la garantie et mettra fin à la responsabilité de Vermeiren.
- N'utilisez que les pièces et outils décrits dans ce manuel.
- Assurez-vous qu'aucune personne aux alentours ne pénètre dans la zone de travail.
- Lorsque vous réglez et utilisez le fauteuil roulant, assurez-vous de ne coincer aucun objet ni aucune partie de votre corps entre les pièces mobiles.
- Utilisez uniquement les paramètres de ce manuel.
- Assurez-vous que le réglage est identique à gauche et à droite du fauteuil roulant.
- Toute dérogation aux paramètres de réglage peut influencer la stabilité du fauteuil roulant et présenter un risque de renversement ou de chute.
- **Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser le fauteuil roulant. Pour les vis, respectez les couples de serrage qui figurent dans le Tableau de couples sur notre site Internet.**


i Remarque importante

- Pour de plus amples informations, prenez contact avec Vermeiren, cf. le site Internet <http://www.vermeiren.com/>.

3.1 Profondeur du siège


i Remarque importante

Lors du réglage du raccord du dossier, assurez-vous que les 3 vis (point 59, dans l'exemple) sont bien serrées.
 Pour éviter que les systèmes de protection antivol ne réagissent au châssis du fauteuil roulant, les vis (59) doivent être tournées **à travers** le revêtement du châssis !

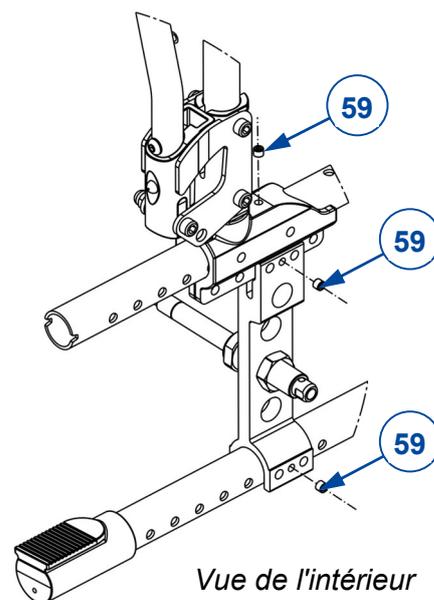


Profondeur du siège	Trous de position de croix	Trous de position de dossier
440 mm	Trous 1 et 3	Position 1
420 mm (Par défaut)	Trous 2 et 4	Position 1
480 mm	Trous 2 et 4	Position 3
460 mm	Trous 1 et 3	Position 2

Position de croix

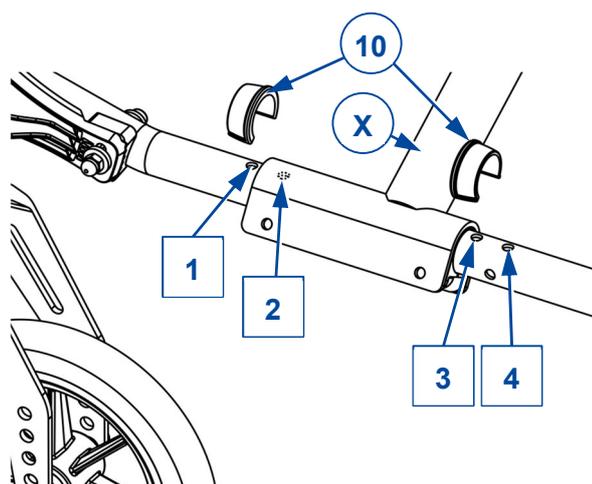

Position de dossier

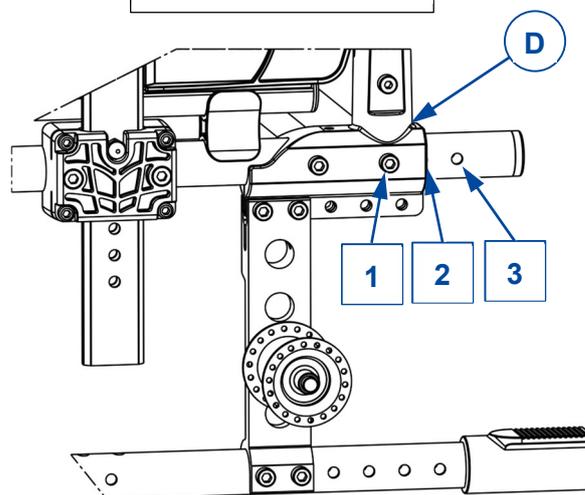

Position de la croix (si réglable)

1. Retirez le clip (10), de chaque côté du fauteuil roulant.
2. Déplacez la croix (X) vers l'avant/arrière à la position souhaitée conformément aux indications des tableaux des parties précédentes.
3. Remplacez les deux clips (10) de chaque côté du fauteuil roulant pour verrouiller la position de la croix.

Position du raccord du dossier


1. Démontez les deux vis à tête creuse du raccord du dossier, des deux côtés du fauteuil roulant.
2. Déplacez le raccord du dossier (D) vers l'avant/arrière à la position souhaitée conformément aux indications des tableaux des parties précédentes.
3. Serrez les 2 vis à tête creuse ; des deux côtés du fauteuil roulant.
4. Vérifiez si la hauteur et l'inclinaison du siège sont réglées correctement.

3.2 Longueur de cale-pied

3.2.1 Réglage par paliers

Régalez la longueur de la manière suivante (3 trous sur le tube intérieur, 3 trous sur le tube extérieur ; portée de 120mm) :


1. Enlevez la vis (27).
2. Réglez le cale-pied à une longueur confortable.
3. Resserrez la vis.
4. Répétez cette opération pour l'autre cale-pied. Assurez-vous que les cale-pieds sont positionnés identiquement.

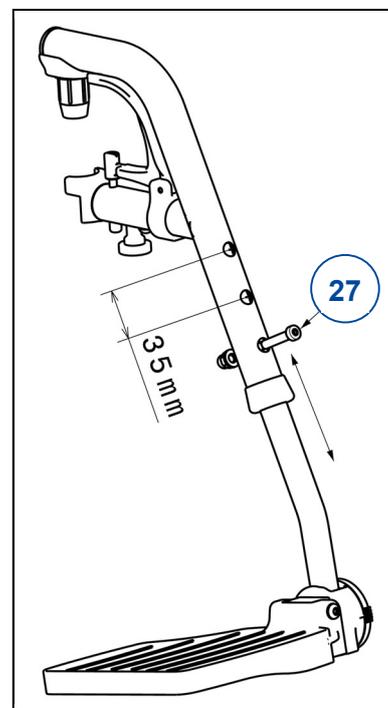

3.3 Profondeur d'accoudoir

Régalez la profondeur de l'accoudoir de la manière suivante (plage 120 mm : sans échelon) :


1. Desserrez les deux vis à tête creuse (35) à la base de l'accoudoir.
2. Déplacez l'accoudoir vers l'avant ou l'arrière dans la plage des trous oblongs (42,5 mm).
Si ce n'est pas suffisant, desserrez les vis à tête creuse et fixez l'accoudoir à l'aide des autres trous (3 positions disponibles).
3. Serrez bien les deux vis à tête creuse.
4. Répétez l'opération pour la deuxième manchette. Assurez-vous que les deux manchettes sont positionnées identiquement.

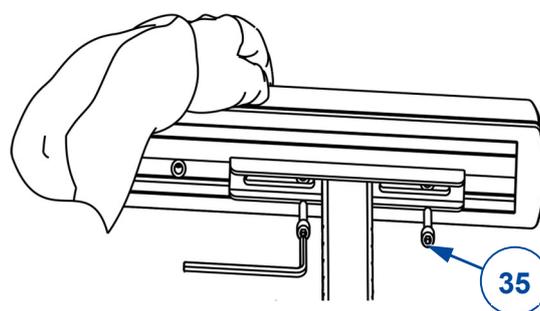

3.4 Hauteur d'accoudoir

La hauteur de l'accoudoir est réglable à 6 positions de la manière suivante :

1. Sortez l'accoudoir de son support.
2. Retirez la vis à tête creuse (36) qui permet de régler la hauteur.
3. Installez la vis dans le trou souhaité.
4. Insérez l'accoudoir dans son support.
5. Vérifiez la hauteur ; réajustez si nécessaire.
6. Répétez l'opération pour le deuxième accoudoir. Assurez-vous que les deux accoudoirs sont positionnés identiquement.

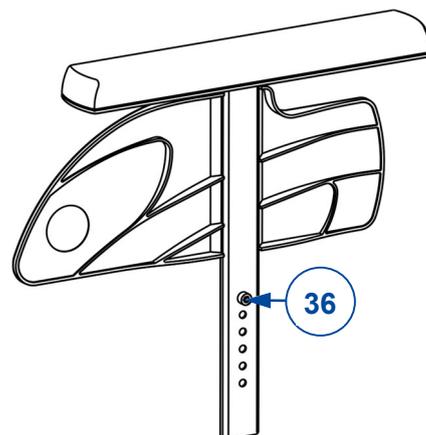



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

site web: www.vermeiren.com

Instructions pour les distributeurs

Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque produit vendu.

Version: A, 2023-06

Basic UDI: 5415174VersoG7

Tous droits réservés, y compris la traduction.