

Illico

Pflegebett für die häusliche Pflege

Absenkbare Holz- Seitengitter zusammen mit Stirnteilen in Vollholz mit Griffleiste. Auch als Niederflurbett verwendbar, da der Lattenrost auf minimal 298 mm absenkbar und mittels hoher Hubhöhe von 530 mm auf eine maximale Pflegehöhe von 828 mm elektrisch verstellbar ist.

*Einfache und schnelle Montage,
bzw. Demontage ohne zusätzliches
Werkzeug, möglich durch ein
sehr intelligentes Klicksystem*



*Niedrige Lattenrosthöhe
von 298mm und angenehme
Pflegehöhe von 828mm*




VERMEIREN
we care for you

Komfortabel und praktisch

- höhenverstellbare Matratzenauflage von 298 mm - 828 mm
- Liegefläche 900 mm x 2000 mm
- einfach mit der Handbedienung elektrisch verstellbar
- Handbedienung mit Sperrfunktion
- Belastbarkeit: 170 kg (Patient und Matratze)
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Knieknickverstellung, das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden
- zwei Paar Holz Seitengitter zum Absenken oder Sichern des Patienten
- Aufrichter mit Trapez- beidseitig montierbar
- vier bremsbare Räder
- Kopf- und Fussteile aus Holz
- mittels mitgeliefertem Transportadapter einfach zu transportieren und zu lagern.



Einfache Montage und Demontage

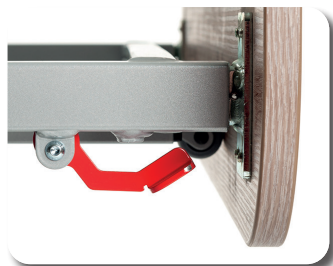

Einfaches Entfernen der Kopf- und Fussteile



Gebremste Rollen



Optional mit geteilten Seitengitter Buche

Technische Informationen

| | |
|--|---------------|
| ■ Gesamtbreite | 1024 mm |
| ■ Gesamtlänge | 2080 mm |
| ■ Gesamthöhe | 783 - 1313 mm |
| ■ Höhe des Matratzengestells (verstellbar) | 298 - 828 mm |
| ■ Max. Winkel Kopfbereich | 70° |
| ■ Max. Winkel Oberschenkel | 36,8° |

| | |
|--|--------|
| ■ Max. Winkel Unterschenkel | -17,2° |
| ■ Matratzenspezif. Min. RG 35, Dicke 120 mm, 2000x900 mm | |
| ■ Nennbelastung Aufrichtstange | 75 kg |
| ■ Gewicht | 85 kg |
| ■ Maximales Benutzergewicht | 135 kg |
| ■ zusätzliche Information | CE |

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Illico Pflegebett** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN
we care for you