

PLEGO



VERMEIREN
we care for you

Facile à plier



24,5 kg

Poids total



Explorez le monde avec Plego



Les fauteuils roulants électriques peuvent parfois être difficiles à ranger en raison de leur taille encombrante ou de leur masse totale importante, surtout lors de vos déplacements. Découvrez Plego, un fauteuil roulant électrique pliable et léger qui peut être plié facilement. Même une fois plié, le fauteuil reste debout et peut être manœuvré de manière similaire à une valise.

Que vous fassiez simplement une courte sortie pour faire des courses ou que vous exploriez une ville, Plego peut être facilement utilisé pour explorer tout en étendant votre mobilité. Les moteurs électriques à engrenages sans balai de 2x250 W ne sont pas seulement silencieux et puissants en conduite, mais ils sont également très peu gourmands en entretien et durables à l'usage.

Besoin d'un peu plus de confort urbain? Plego offre diverses options telles qu'un espace de rangement supplémentaire ou des lumières.



FABRIQUÉ EN EUROPE

**PRÊT À PARTIR QUAND
VOUS LE SOUHAITEZ!**

Bâti sur plus de 65 ans d'expertise belge et entièrement fabriqué en Europe, ce fauteuil roulant électrique incarne notre engagement envers les normes de qualité, de sécurité et de confort les plus élevées.

Découvrez plus sur les caractéristiques et les avantages de Plego pour améliorer votre vie!




Facile
à ranger

En quelques étapes, Plego se transforme en un fauteuil roulant compact et facile à ranger. Le système complet sans outils peut être plié par une seule personne sans effort et sans avoir à retirer la batterie.

Ressemblant à une valise de voyage, Plego est équipé de quatre roues supplémentaires maintenant le fauteuil debout même lorsqu'il est plié.

Elles vous permettent également de manœuvrer le fauteuil jusqu'à son espace de stockage désigné. Bien que les moteurs de Plego soient puissants, le poids total du fauteuil roulant a été réduit à seulement 24,5 kg.

Les voyages sur la route n'ont jamais été aussi faciles. Plié dans une taille compacte, soulevez-le dans le coffre d'une voiture sans effort et vous êtes prêt à partir ! Nos concepteurs ont veillé à ce que ce fauteuil roulant puisse être emporté partout où il est nécessaire.

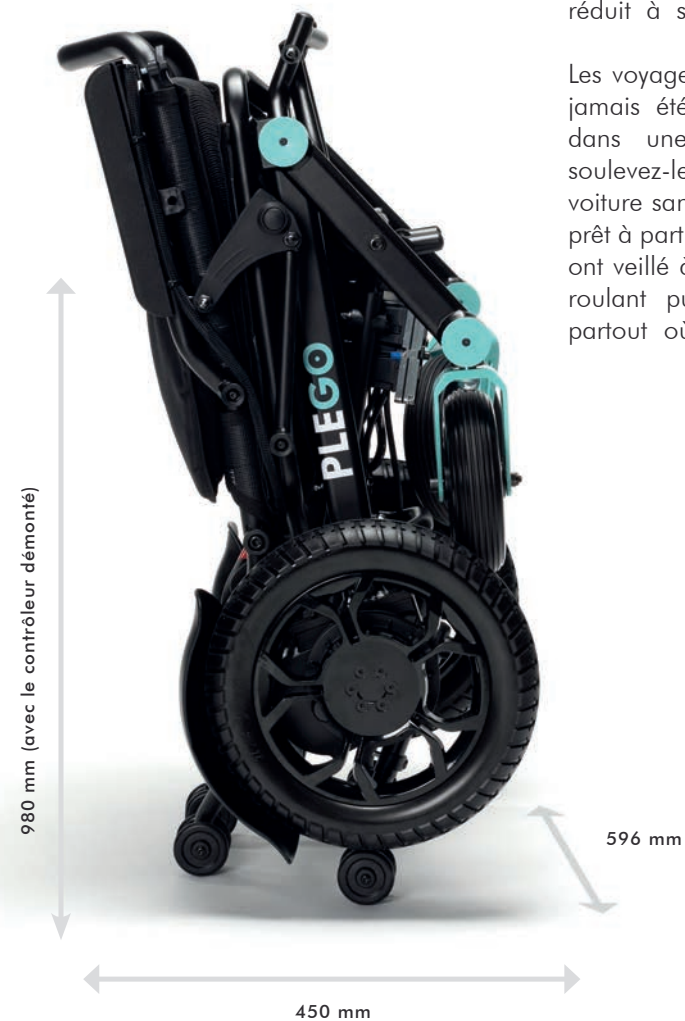

Jusqu'à 21 km* 6 km/h

Avec une vitesse maximale de 6 km/h, Plego est le choix idéal pour partir à l'aventure avec vos amis et votre famille. Il offre une vitesse de marche confortable pour suivre une conversation agréablement. La batterie légère au lithium-ion vous offre une autonomie de conduite allant jusqu'à 21 km. Parfait pour une journée à l'extérieur !

PUISSANCE PLEGO

La sélection du moteur pour Plego met l'accent sur la qualité, la durabilité et l'efficacité. Le moteur à engrenages sans balai d'une puissance de 2x 250 W comprend un mécanisme d'engrenage intégré qui offre une excellente efficacité et longévité par rapport aux moteurs à engrenages classiques. Les moteurs à faible entretien sont non seulement rentables en raison de leur conception, mais sont également discrets et silencieux pendant la conduite.



*17,5 AH ACCU



Besoin d'une batterie supplémentaire ?

Prêt pour une sortie ? Vérifiez facilement l'état de votre batterie tout en étant assis grâce à notre indicateur de batterie situé sous votre siège. La batterie au lithium-ion peut être verrouillée en toute sécurité avec une clé antivol ou chargée séparément de votre fauteuil. Pas besoin d'approcher tout votre fauteuil de la prise. Prenez simplement votre batterie et chargez-la où cela est le plus pratique. Il est important de noter que Plego est approuvé pour le transport aérien selon les normes de l'IATA*.

Pour tranquilliser votre esprit concernant l'autonomie ou la charge de votre batterie, prolongez la durée de vie de votre batterie avec une batterie supplémentaire (12,8 Ah ou 17,5 Ah) qui peut facilement être stockée sous votre siège avec le sac de rangement supplémentaire. Consultez les options à la page 28 pour découvrir comment vous pouvez améliorer votre Plego.

*Veuillez consulter notre manuel pour les informations les plus récentes.

Batterie au
lithium-ion
amovible

MOINS, C'EST PLUS

Le contrôleur de Plego est simple, mais efficace. Nous avons choisi un contrôleur de fauteuil roulant électrique de qualité fabriqué par Penny&Giles pour offrir le meilleur confort de direction possible. Leurs dispositifs de direction font partie des meilleurs disponibles sur le marché des fauteuils roulants électriques.

Les paramètres standard du contrôleur garantissent une expérience de conduite douce et confortable, venant du fabricant de contrôleurs de fauteuils roulants électriques leader dans le monde. Nous nous sommes assurés que n'importe qui puisse utiliser Plego. Il vous suffit de monter à bord et de partir!

CONCEPTION CONVIVIALE

Le contrôleur peut être monté de manière interchangeable à gauche ou à droite et dispose d'une fonction pivotante en option. Des lumières LED optionnelles supplémentaires, assurant une visibilité accrue, peuvent être ajoutées et sont indépendantes du contrôleur.





Parti à l'aventure ?

Pas besoin de stresser pour prendre des virages serrés ou naviguer dans des allées étroites de magasins. La compacité de Plego et son petit rayon de braquage vous permettent de conduire sans souci au quotidien. Le châssis léger et le système de pliage facile à utiliser sont parfaits pour emmener Plego partout où vous voulez explorer des zones urbaines et intérieures sans vous inquiéter.

Pas de voiture ? Nous nous sommes assurés que Plego peut facilement se tenir debout dans un bus ou tout autre moyen de transport par lui-même. Asseyez-vous et détendez-vous.

ALLEZ PLUS LOIN

Nous nous soucions de vous

VERMEIREN, fabricant de fauteuils roulants depuis 1957, est un acteur majeur dans le monde de l'équipement médical. Au fil des ans, le groupe Vermeiren s'est spécialisé dans la production de fauteuils roulants, de lits médicalisés, de coques de fauteuils, de fauteuils de confort et de tout autre produit pouvant accompagner un patient ou un utilisateur dans le maintien de son autonomie et de sa mobilité.

PASSEZ À L'ÉLECTRIQUE

À la maison

Quand et où vous utilisez Plego dépend entièrement de vous. Ce fauteuil roulant léger et pliable peut être rangé lorsque vous n'en avez pas besoin ou utilisé toute la journée à l'intérieur.

Naviguez facilement dans des espaces étroits à la maison, dans les transports en commun ou dans des endroits urbains. Avec une largeur de seulement 59,5 cm, Plego s'adapte facilement à la plupart des portes européennes et évite d'endommager les montants de porte ou d'autres espaces étroits. Pas besoin de votre Plego à la maison ? Rangez votre fauteuil électrique à l'abri de la poussière avec notre housse Plego en option.



Plego a été conçu avec un héritage de plus de 65 ans d'expérience dans la fabrication de fauteuils roulants. Même nos fonctionnalités standard offrent un confort optimal et une polyvalence pour tous les utilisateurs. Le dossier et le siège sont tous deux revêtus d'un tissu en maille 3D pour optimiser la circulation de l'air, le confort et la respirabilité.



LE COMPAGNON PARFAIT POUR L'AVEVENTURE

À l'arrière de Plego, vous trouverez une poche standard incluse, parfaite pour un ordinateur portable ou des lectures.

Pas assez de rangement ? Nous proposons deux poches supplémentaires situées sous le siège pour plus d'options de stockage. Vous constaterez que Plego a un cadre en aluminium robuste pour résister à l'usure quotidienne comme aucun autre.

La repose-pieds monobloc pliable peut être ajustée en deux positions de hauteur et remplit une double fonction. Non seulement elle offre un soutien en position assise, mais elle protège également le cadre et la batterie lors du transport du fauteuil roulant en position pliée.



C77 Noir Brillant

Le noir, l'incarnation de la sophistication intemporelle, évoque un sentiment de mystère et d'élégance. Il incarne le pouvoir et l'autorité, symbolisant souvent la formalité et le prestige. Dans la mode et le design, il agit comme une toile polyvalente, renforçant l'impact d'autres couleurs tout en ajoutant une touche de finesse à n'importe quel contexte.



C88G Or Brillant

L'éclat radieux de l'or est synonyme de richesse, de luxe et de réussite. Il incarne la prospérité et le succès, illuminant le chemin vers l'opulence. En tant que symbole de l'aisance, l'or transcende le temps et la culture, laissant un héritage scintillant d'extravagance et de grandeur.



C56G

Bleu Métallique

Le bleu métallique représente une fusion de modernité et d'innovation, incarnant l'esthétique élégante et high-tech du futur. Cette couleur froide et futuriste captive par son sens de la précision et de l'efficacité. Dans diverses industries, elle reflète un design de pointe et une technologie de pointe, symbolisant le progrès et l'adaptabilité.



C52

Turquoise Brillant

La nuance apaisante de la turquoise embrasse la tranquillité et l'équilibre. Son influence apaisante évoque les qualités sereines de la nature, ressemblant aux eaux cristallines des paradis tropicaux. En tant que couleur de renouveau et de rajeunissement, elle favorise le bien-être et la croissance spirituelle.



C87G

Orange Melon Brillant

L'orange melon rayonne de chaleur et d'enthousiasme, infusant les environs d'une explosion d'énergie et de joie. Cette teinte vibrante est associée à la créativité et à la ludicité, en faisant un choix parfait pour des rassemblements animés et des entreprises artistiques. Elle incarne l'esprit de la célébration et de la gaieté.



C4G

Rouge Brillant

Le rouge allume les passions qui brûlent en nous, représentant l'amour, l'énergie et l'excitation. Cette teinte audacieuse et vibrante capte l'attention sans effort, que ce soit dans le domaine de la romance, de l'art ou du design. Elle symbolise la détermination et le courage, résonnant avec l'essence ardente de l'esprit humain.



**B64 SAC DE RANGEMENT
SOUS LE SIÈGE**



**B63 SAC DE RANGEMENT
DERRIÈRE LE REPOSE-PIEDS**



SE19 LUMIÈRES



APPUI-TÊTE




**ESE45 HOUSSE
DE RANGEMENT**

Options

Pour répondre à une large gamme de préférences et de besoins, nous proposons plusieurs options pour votre Plego. Rangez votre Plego ou ajoutez des fonctionnalités supplémentaires pour convenir à vous et à vos besoins.



**BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE
12,8 AH OU 17,5 AH**

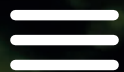

Vermeiren.fm

PLEGO



VERMEIREN

playlist de voyage



ÉCOUTEZ-MOI SUR SPOTIFY

PLEGO

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	595 mm
■ Longueur totale	1000 mm
■ Hauteur du siège	530 mm
■ Largeur du siège	450 mm
■ Profondeur du siège	430 mm
■ Hauteur du dossier	460 mm

■ Batteries	12,8 Ah - 24 V ou 17,5 Ah - 24 V
■ Moteurs*	2 x 250 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Autonomie	15 km ou 21 km
■ Poids	24,5 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg

* L'autonomie théorique est calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales.

* Les vitesses et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %).

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch

Pour plus d'informations, prenez contact
avec votre revendeur local.

