

TURIOS

Our most compact






■ Ultra-compact

Le Turios est notre fauteuil électrique le plus compact. Il est entièrement configurable selon vos besoins et vos souhaits. Une large gamme de couleurs et d'options est disponible afin que vous puissiez créer le Turios qui vous correspond.

Grâce à sa petite taille, le Turios est facilement manoeuvrable et convient donc à une utilisation en intérieur. Prendre les transports en commun, utiliser un ascenseur ou se déplacer dans votre appartement ne pose aucun problème à ce fauteuil roulant électrique compact.

En extérieur, le Turios est également très performant. Avec ses grandes roues avant, il est adapté pour franchir les seuils de porte et il conserve une stabilité optimale.

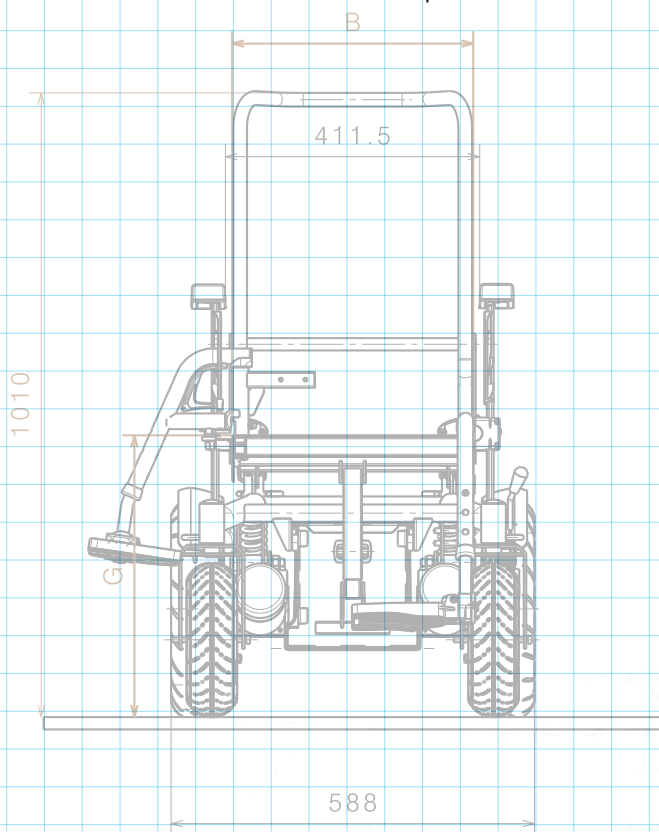

ROUES ARRIÈRES



ROUES AVANT



8" (200 mm)



9" (230 mm)



10" (260 mm)

■ Personnalisez votre Turios

Configurez votre Turios en fonction de votre style de vie et de vos goûts ! Que vous souhaitez rester la majeure partie de votre temps en intérieur ou vous aventurer en extérieur, votre Turios s'adapte à toutes les situations.

La jante accentuée est de la même couleur que le cadre Turios que vous avez choisi lors de votre commande.

■ Configurez votre Turios

Le confort est très important dans un fauteuil roulant, c'est pour cela que vous aurez plusieurs choix d'assises et de dossiers à la commande de votre fauteuil.

Par exemple, pour un meilleur positionnement et une posture plus stable, nous recommandons un dossier ou un coussin moulé. Choisissez un revêtement PU Soft Touch ou un cuir artificiel élégant.



*Turios C5 noir - Appui-tête L55
Kit éclairage LED SE19 - Repose-jambe articulé
auto-corrigeant en longueur BZ8*

Dossier / Coussin pré-formé L34 L35 PU Soft Touch



*Coussin pré-formé
L34 3D Net*



*Coussin pré-formé
L34 Artificial leather*



*Coussin pré-formé
L34 Nylon PLUS*



*Coussin pré-formé
L35 3D Net*




*Coussin pré-formé
L35 Artificial leather*



*Coussin pré-formé
L35 Nylon PLUS*



Modifiez vos points d'appui tout au long de la journée grâce à la bascule d'assise et de dossier par vérins électriques incluse dans toutes les versions du Turios.

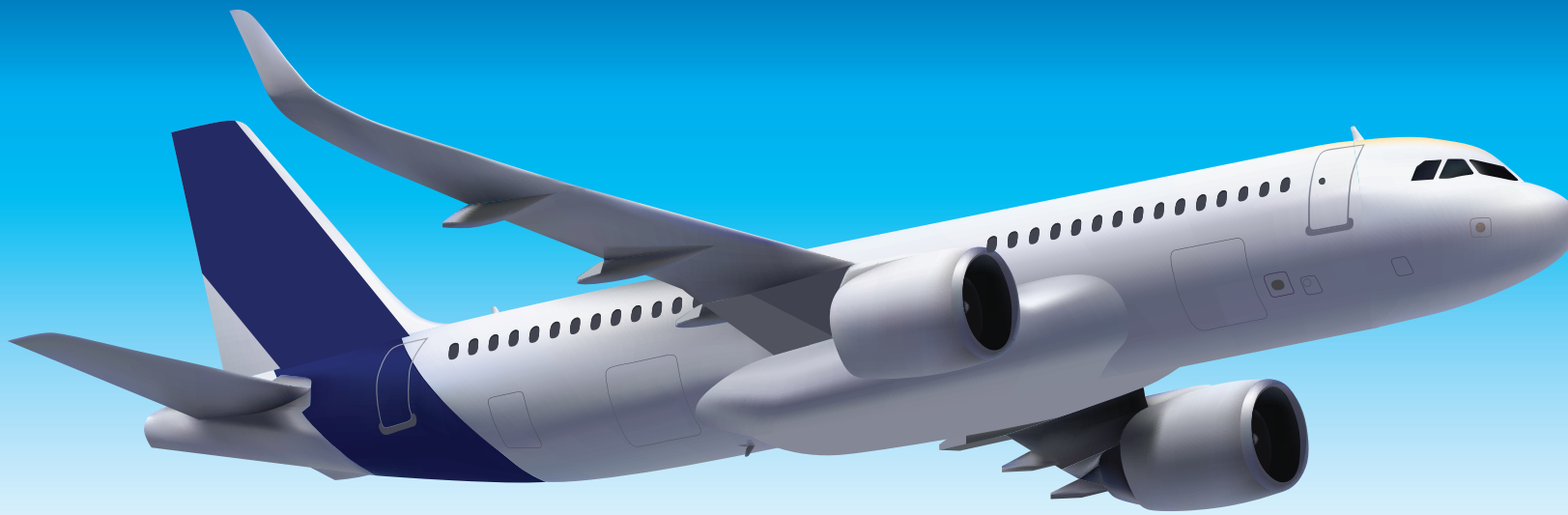

■ Votre Turios voyage partout avec vous !



Les batteries 2 x AGM 12V / 50 Ah (C20) lui permettent d'être transportées par avion



Le Turios a été crash testé selon la norme **ISO 7176-19** et peut être utilisé comme siège face à la route dans les véhicules à moteur par les enfants et adultes ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 22 kg.

■ Couleurs


Le Turios est disponible en 7 couleurs standard différentes. En choisissant une couleur, le châssis et les jantes des roues arrière seront de cette couleur.



C4
ROUGE VIF



C5
NOIR

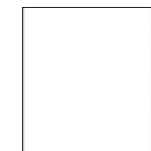

C76
BLANC MÉTALLISÉ



C77
NOIR MÉTALLISÉ



C79
BLEU PACIFIQUE



C85
VERT ÉLECTRIQUE



C87
ORANGE



AUTRE COULEURS
SUR DEMANDE



SE09 - Commande tierce-personne



SE06 - Chargeur USB



B31 - Porte-canne



BZE - Repose-jambes électriques



SE19 - Eclairage LED



SE27 - Top Case

LiNX™

LiNX, la dernière génération de boîtiers de commande

- Système évolutif
- Composants modulables
- Technologie mise à jour
- Nouvelle interface de programmation



Une liste complète de toutes les options possibles est disponible sur le site www.vermeiren.ch

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	580 - 640 mm
■ Longueur totale	1060 - 1070 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Largeur d'assise	390 - 450 - 510 mm
■ Profondeur siège	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm

■ Batteries/Puissance	2x12V/50Ah / 2x450W
■ Vitesse	10 km/h
■ Rayon d'action	jusqu'à 39 km
■ Poids	105,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	 

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

TURIOS

Our most compact

- fauteuil roulant électrique compact
- utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- puissante traction arrière
- excellent confort de conduite

distribué par :

VERMEIREN Schweiz AG
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

VERMEIREN
we care for you

